



natura
Ceram

Paste Stain & Glaze

For Color Masters

IDEAS 
DENTALES
INTELIGENCIA EN PRÓTESIS DENTAL

natura Ceram

The aesthetic paste ceramic system of Natura Ceram™ gives technicians the ability to easily create aesthetic restorations with great similarity to natural teeth with ultra thin layer.

Natura Ceram™ currently works well with monolithic zirconium, lithium disilicate crowns as well as conventional porcelain layered crowns, it is easy to integrate in any laboratory work flow.

Advantage

- 1. Easy and Simple way for monolithic crowns more aesthetic.**
- 2. Easy Color Correction;** it allows you to change easily and quickly modify value & chrome.
- 3. Paste Ceramic, Alternative to powder ceramic;** an efficient way of creating highly characterized restorations that rivalize with aesthetics that normally can only be seen in Porcelain layered Crowns.
- 4. Clear & High shine Glaze with Fluorescence.**



El sistema cerámico de pasta estética de Natura Ceram™ brinda a los técnicos la capacidad de crear fácilmente restauraciones estéticas con gran similitud a los dientes naturales en una capa ultrafina.

Natura Ceram™ actualmente funciona bien con zirconio monolítico, coronas de disilicato de litio y coronas de porcelana convencionales, es fácil de integrar en cualquier flujo de trabajo de laboratorio.

Ventaja

- 1. Manera fácil y sencilla para coronas monolíticas más estéticas.**
- 2. Fácil corrección de color;** te permite modificar fácil y rápidamente valor & croma.
- 3. Pasta de cerámica, alternativa a la cerámica en polvo;** Una forma eficiente de crear restauraciones altamente caracterizadas que rivalizan con la estética que normalmente solo se pueden ver en las coronas de porcelana en capas.
- 4. Glaze Claro y Alto Brillo con Fluorescencia.**

* Peso Neto: 5g

natura Ceram

Natura Ceram™ offers a range of 11 colors and a crystal clear glaze to help imitate the natural incisal translucency, the mamelons, pits, fissures and shiny surfaces.

Natura Ceram™ ofrece una gama de 11 colores y un esmalte cristalino para ayudar a imitar la translucidez incisal natural, los mamelones, las fosas, las fisuras y las superficies brillantes.

colours

A Body

B Body

C Body

D Body

Pink

Blue

Mamelon Brown

Linen

Trans Grey Violet

Snow

Yellow

Glaze



Pasta Stain & Glaze Temperatures from 760°C-850°C

Materials	Initial Time (°C)	Dry Time (Min)	Fire Time (°C/min)	Maximum Temperature (°C)	Retention (min)
Zirconia (monolithic)	500	05:00	50	850	01:00
Lithium Disilicate (monolithic)	500	05:00	50	820	01:00
Porcelain fused to metal	500	05:00	50	850	01:00
E-max Porcelain	500	05:00	50	760	01:00



* Illustrative images, colors may have slight variations

natura Ceram

Natura Ceram™ Paste Glaze

It is a ceramic specifically formulated to glaze dental ceramic crowns. These materials are used to glaze all kinds of dental ceramic restorations such as PFM, Zirconia, Lithium Disilicate and Porcelain.

Application:

- Dispense the amount of pasta to use.
- Wet the brush with the Glaze liquid and dry the excess with an absorbent paper.
- If necessary, add a drop or more to the paste to improve the consistency.
- Use only the Glaze liquid, do not use water because it will produce bubbles and separation in the mixture.
- Take the paste with the brush and apply evenly over the restoration.
- Cook according to the schedule of the table.




Natura Ceram™ Pasta Glaze

Es una cerámica específicamente formulada para el glaseado de coronas dentales cerámicas. Estos materiales se utilizan para barnizar todo tipo de restauraciones, como PFM, zirconia, disilicato de litio y porcelana.

Aplicación:

- Dispense la cantidad de pasta a usar.
- Humedezca el pincel con el líquido de Glaze y seque el exceso con un papel absorbente.
- Si es necesario agregue una gota o más a la pasta para mejorar la consistencia.
- Use solo el líquido de Glaze, no use agua pues producirá burbujas y separación en la mezcla.
- Tome la pasta con el pincel y aplique uniformemente sobre la restauración.
- Hornee de acuerdo al programa de la tabla.

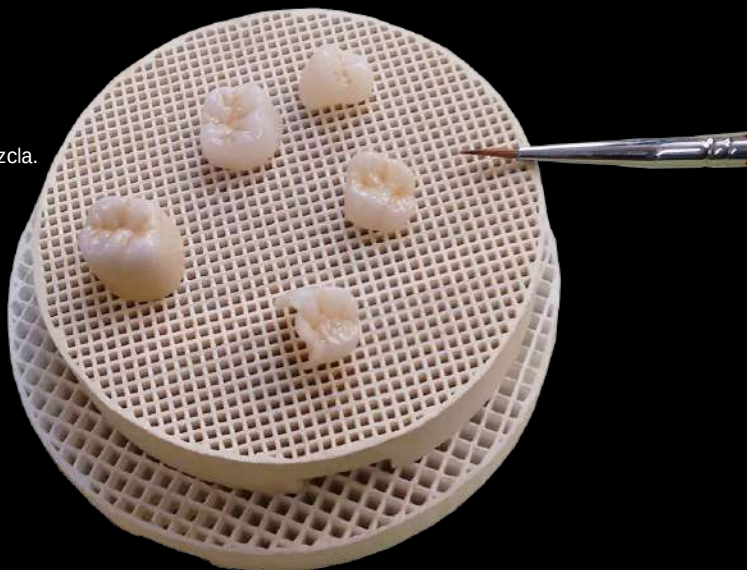

IDEAS 
DENTALES

INTELIGENCIA EN PRÓTESIS DENTAL

www.ideasdentales.com